


Montageanleitung Therapietisch Universal

Lieferumfang: Platte, 4 Schienen, 4 Höhenpuffer, 4 Schrauben, 4 Distanzscheiben, 4 Griffmuttern


1. Lockern der Breiteneinstellung

Um die Breite des Therapietisches einstellen zu können, müssen vorerst die Schienen gelockert werden. Hierfür drehen Sie die Griffmuttern auf, sodass sich die Schienen entlang der Bohrschlitze bewegen lassen.

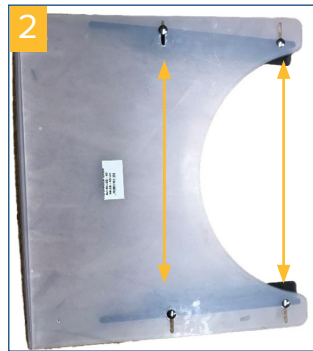

2. Anpassung der Breite

Nun wird der Therapietisch so auf die Armlehnen gelegt, dass beide Schienen (alle vier Schrauben) außerhalb positioniert sind. D.h. dass der Tisch anfangs „zu weit“ eingestellt ist. Als nächstes werden die Schienen bis zum Anschlag in Richtung der Armlehnen geschoben. Nun können Sie die Griffmuttern auf der Unterseite anziehen.

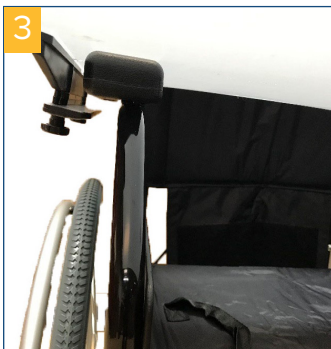


3. Eventuelle Anpassung der Höhe

Im Falle, dass sich der Tisch noch nach dem Fixieren an den Seiten nach oben und unten bewegen lässt, so kann auch die Höhe der Fixierung eingestellt werden. Hierfür können, wie auf der Abbildung dargestellt, die Höhenpuffer entfernt werden.



4. Entfernung/ Ergänzung der Höhenpuffer


Als erstes wird die Griffmutter gelockert und gelöst. Danach entfernen Sie die Distanzscheibe.

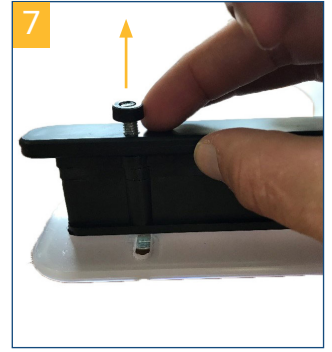

Daraufhin wird die Schiene zur Höhenfixierung abgenommen. Abschließend können die Höhenpuffer nach Bedarf entfernt bzw. angebracht werden, um ein bündiges Fixieren des Therapietisches zu gewährleisten. Die Höhenfixierung ist wieder zu befestigen, da diese zum Spannen des Tisches nötig ist.



Danach stecken Sie die Distanzscheiben wieder auf die Schraube. Abschließend müssen die Griffmuttern wieder an der Schraube befestigt werden.

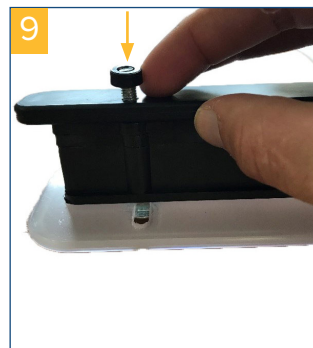

Hinweise über: Sicherheit, Lagerung, Wartung, Pflege, Reinigung, Reparatur, Entsorgung und Gebrauch, entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung des Herstellers TheraMedical GmbH


Assembly instructions

wheelchair tray

Lieferumfang: Top, 4 rails, 4 height adapter, 4 screws, 4 washers, 4 nuts


1. Loosening width adjustment

To be able to adjust the width of the Wheelchair tray, the rails must first be loosened, picture 1. To do this, unscrew the nuts so that the rails can be moved along the drill slots, picture 2.

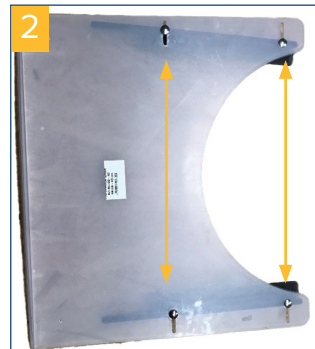

2. Width adjustment

Now place the wheelchair tray on the armrests of the wheelchair so that both rails (all four screws) are positioned outside. This means that the table is initially set „too wide“, picture 3. push the rails towards the armrests as far as they will go. Now you can tighten the handle nuts on the underside, picture 4.

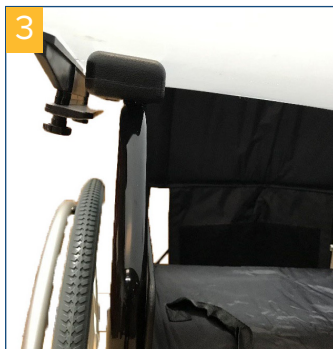


3. height adjustment

If the wheelchair tray can still be moved up and down after it has been fixed at the sides, the height of the fixation can also be adjusted. please add or remove the hight adapter. ti djsut the hight of the wheelchair tray. Picture 5



4. Removing / adding the height adapter


loosen and release the nut, picture 6. Remove the washer, picture 7.

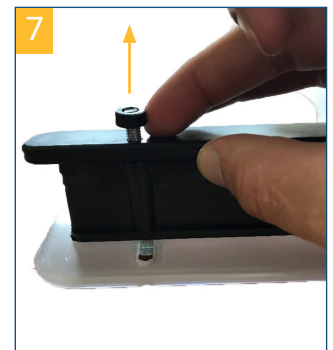

Remove the rail, picture 8. Finally, the height adapters can be removed or attached as required to ensure that the wheelchair tray is fixed flush. The height fixation must be reattached, as this is necessary for tensioning the table.



Then put the washers back onto the screw, picture 9. add the nuts back onto the screw picture 10.

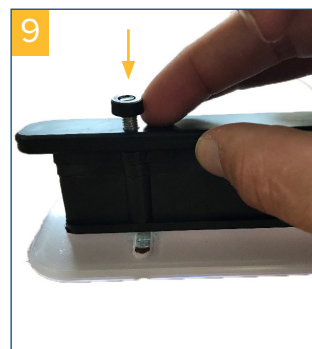

Notes about: safety, storage, maintenance, care, cleaning, repair, disposal and use refer to the instructions from the manufacturer TheraMedical GmbH.